


Atemwegsokklusionsdruck P0.1

Messung des Atemweg-Verschlussdrucks 0,1 sec nach Beginn der Inspiration unter Spontanatmung.

> Indikator für den neuromuskulären Atemantrieb

Prinzip:

- Expirationsventil schließt
- Inspiration beginnt, Druck im Atemschlauch fällt ab
- Inspirationsventil wird bei -0,5 mbar geschlossen (P1)
- Patient atmet gegen geschlossenes Ventil, Druck fällt weiter
- Nach 100 ms wird P2 gemessen und Inspirationsventil geöffnet
- $P0.1 = P2 - P1$

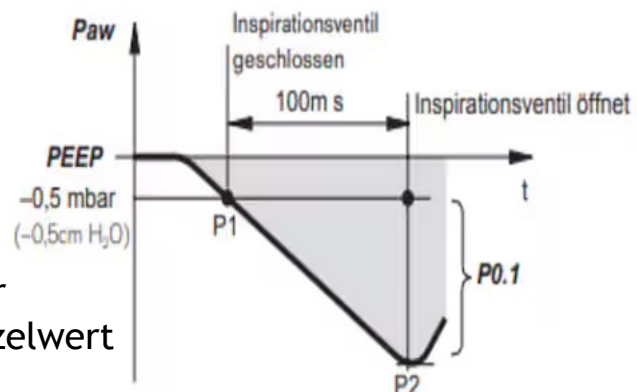


Normwert:

-1 bis -4 mbar, bei COPD auch bis -6 mbar

Hierbei ist der Trend wichtiger als ein Einzelwert

Merke:

Je niedriger der Wert, desto größer die Gefahr einer respiratorischen Erschöpfung.

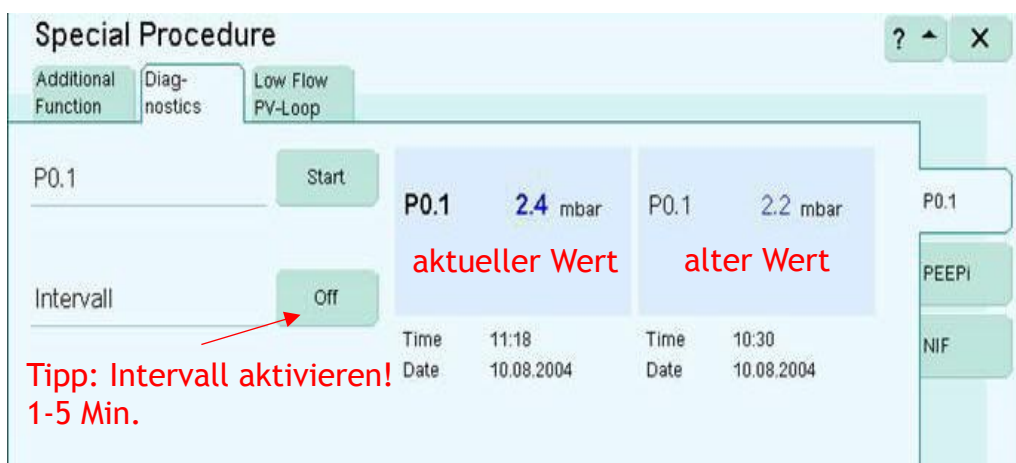

Aufruf über: Spezielle Manöver > Diagnostik > P0.1



[Thema]

Quellen

Oczenski W (Hrsg.); Atmen-Atemhilfen; Thieme Verlag,
9. Auflage; 2012

Dräger "Mini-Handbuch Beatmung"; 2015

Bildquellen

<http://kscottrichey.blogspot.com/2012/09/obtaining-p01-on-various-ventilators.html>

https://www.draeger.com/de_de/Hospital/Ventilators/Mechanical-Ventilation/BIPAP